
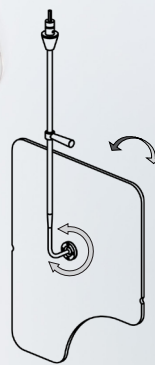


PL

OT50001
OT90001

MAVIG

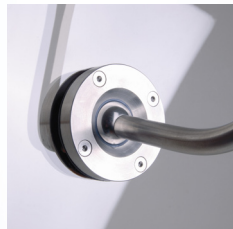

S TEA-OT5 Jednorazowy sterylny (Akcesorium) pokrowiec na całą tarczę

Kod Artykułu: OT50001
OT90001
E-OT25B05

Tarcza w komplecie z wysięgnikiem Portegra2 (długość wysięgnika 75 cm)
Tarcza w komplecie z wysięgnikiem Portegra2 (długość wysięgnika 95 cm)
Wymienna osłona i listwa połączeniowa

IEC 60601-1

Made in Germany




OT50001/OT90001 – Tarcza ochronna w zawieszeniu fufitowym

Produkty MAVIG zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić solidną ochronę i zoptymalizowaną funkcjonalność. Pozwala na to wysokiej jakości osłona akrylowa OT51xxx. Zapewnia ona doskonałą ochronę a jednocześnie daje doskonałą widoczność. Wszystkie krawędzie i rogi zostały zaokrąglone a zastosowanie nietłukącego się akrylu zostały zastosowane w celu zminimalizowania ryzyka obrażeń.

Opatentowany przez MAVIG system Portegra2 zapewnia sfobodne przestawianie osłony i umieszczanie jej w dowolnym miejscu. Centralnie prowadzenie tarczy oraz wycięcie pozwala na proste przyłożenie do pacjenta i odcięcie promieniowania jonizującego.

- **Tarcza akrylowa** WxH: 60 x 76 cm (23.6 x 29.9 in)
- **Równoważnik ołowiu** Pb 0.50 mm
- **OT50001** Wysięgnik / ramię sprężyste
Długości: 75 cm / 91 cm
Kolor: RAL 9002
- **OT90001** Wysięgnik / ramię sprężyste
Długości: 95 cm / 91 cm
Kolor: RAL 9002

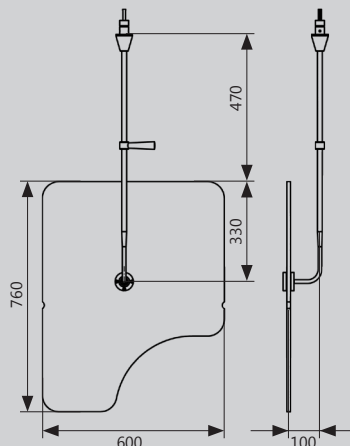

Model Medical S.A.
Dystrybutor na polskę

ul. Zabłocie 27/42
30-701 Kraków

Tel .: 123452390
Fax. : 12 345 23 91

e-mail : biuro@modelmedical.pl

